

samaritan® PAD 350P

Ημι-αυτόματος Εξωτερικός Απινιδωτής με Καθοδήγηση ΚΑΡΠΑ

Συμπαγής και Εύχρηστος Η Τεχνολογία στην Υπηρεσία της Ζωής

Η αιφνίδια καρδιακή ανακοπή είναι μια από τις κύριες αιτίες θανάτου παγκοσμίως και ο χρόνος απόκρισης σε μια τέτοια κατάσταση είναι κρίσιμος παράγοντας για την επιβίωση του ασθενούς. Ο samaritan® 350P είναι ειδικά σχεδιασμένος για χρήση σε χώρους μεγάλης επισκεψιμότητας όπως δημόσιες υπηρεσίες, γήπεδα, στρατόπεδα, αεροδρόμια, εμπορικά κέντρα, ξενοδοχεία, αποτελώντας έναν σύγχρονο και εκλεπτυσμένο απινιδωτή για χρήση σε ενήλικους ή παιδιά, με ένα ελαφρύ και εύχρηστο σύστημα απινίδωσης.

Μικρό Μέγεθος - Μεγάλες Ικανότητες

Φορητός και ελαφρύς. Ο απινιδωτής Samaritan® 350P είναι ελαφρύτερος κατά 1.1kg και μικρότερος σε μέγεθος σε σχέση με άλλους απινιδωτές της αγοράς.

Ανθεκτικός. Ο Samaritan® 350P είναι ανθεκτικός σε πτώσεις και κυπήματα και έχει βαθμολόγηση IP56, η οποία είναι η υψηλότερη βαθμολόγηση αντοχής ενάντια στη σκόνη και την υγρασία. Κατέχει επίσης το στρατιωτικό πρότυπο droptest.

Προηγμένη Τεχνολογία. Ο Samaritan® 350P χρησιμοποιεί τη δική του τεχνολογία στα ηλεκτρόδια απινίδωσης, προηγμένο και σταθερό λογισμικό, καθώς και την δική του διφασική τεχνολογία SCOPE™, μια κλιμακούμενη και χαμηλής ενέργειας κυματομορφή που προσαρμόζεται αυτόματα στις διαφορές αντίστασης του κάθε ασθενούς, για να εκτιμήσει το ρυθμό και να συστήσει απινίδωση σε περίπτωση που χρειάζεται.



Μολακή, δερμάτινη θήκη συμπεριλαμβάνεται σε κάθε συσκευασία διασφαλίζοντας έτσι την ασφαλή μεταφορά του Samaritan® 350P

Εύκολη Οπτική και Φωνητική Καθοδήγηση στην Ελληνική Γλώσσα

Φιλικός προς το Χρήστη. Ο απινιδωτής Samaritan® 350P έχει εύκολες οπτικές και φωνητικές οδηγίες στα ελληνικά, που καθοδηγούν τον χρήστη σε όλη τη διάρκεια της διαδικασίας συμπεριλαμβανομένης της καθοδήγησης ΚΑΡΠΑ.

Εύκολη Λειτουργία. Δύο μόνο πλήκτρα (ON/OFF & SHOCK), είναι απαιτούμενα για όλη τη διαδικασία.

Πάντα Έτοιμος προς Χρήση. Η ένδειξη ετοιμότητας του συστήματος (System Status Indicator) αναβοσβήνει για να δείξει ότι το σύστημα είναι πλήρως λειτουργικό και έτοιμο προς χρήση. Η συσκευή αυτό-ελέγχεται αυτόματα κάθε εβδομάδα.



οπτικές οδηγίες για τη σωστή τοποθέτηση των ηλεκτροδίων



οπτικές οδηγίες για την απομάκρυνση του διασώστη από τον ασθενή




οπτικές οδηγίες για την ασφαλή επαφή του διασώστη με τον ασθενή

Πραγματική Οικονομία για τον Πραγματικό Κόσμο

Δύο μέρη, μια ημερομηνία λήξης. Το πακέτο PadPak™ συνδυάζει μπαταρία και pads ηλεκτροδίων, με μία ημερομηνία λήξης.

Χαμηλό κόστος. Με διάρκεια ζωής τεσσάρων χρόνων από την ημερομηνία κατασκευής του, το PadPak™ προσφέρει σημαντική μείωση του κόστους σε σχέση με άλλους απινιδωτές που απαιτούν ξεχωριστή αγορά μπαταρίας και pads με ενσωματωμένα ηλεκτρόδια.

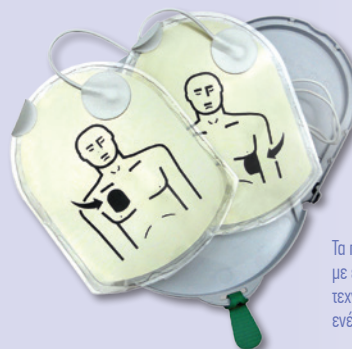

Το πακέτο PadPack και Pediatric Pack με ενσωματωμένα ηλεκτρόδια, σχεδιασμένα με την υψηλή τεχνολογία της HeartSine, διασφαλίζουν την απαιτούμενη παροχή ενέργειας τόσο για τα παιδιά όσο και για ενήλικες ασθενείς

Τεχνικές Προδιαγραφές

Προδιαγραφές Λειτουργίας

Μέθοδος:	Κλιμακούμενη διφασική απινίδωση (SCOPE)
Αποδιδόμενη ενέργεια:	150-200 joule
Χρόνος φόρτισης:	150J < 8sec, 200J < 12sec
Στοιχεία ελέγχου:	2 πλήκτρα "ON / OFF" & "SHOCK"
Οδηγίες Χρήσης:	Πλήρεις ηχητικές και φωνητικές προτροπές προς τους διασώστες

Μέγεθος

Διαστάσεις:	20 x 18.4 x 4.8cm
Βάρος:	1.1kg συμπεριλαμβανομένης της μπαταρίας.

Περιβαλλοντική Λειτουργία

Θερμοκρασία Λειτουργίας:	0 έως 50°C
Υψόμετρο Λειτουργίας:	0 - 15.000ft (4.575m) Κατάλληλος για χρήση σε αεροπλάνο
Σχετική Υγρασία:	5 - 95% (μη συμπυκνωμένη)
EMC:	EN 60601-1-2
Ακτινοβολία:	EN55011
Ηλεκτροστατική Αντοχή:	EN61000-4-3 80MHZ-2.5GHZ (10 V/m)
Μαγνητική Αντοχή:	EN61000-4-8 (3 A/m)
Μέγιστο Ύψος πτώσης:	1 m

Κάθε Συσκευασία Περιλαμβάνει

Απινιδωτή HeartSine Samaritan® 350P
Ένα πακέτο Pad-Pak ενηλίκων το οποίο αποτελείται από μία μπαταρία μεγάλης διάρκειας ζωής (4 έτη) και ένα σετ ηλεκτροδίων απινίδωσης ενηλίκων.
Μαλακή θήκη μεταφοράς
Εγχειρίδιο χρήσης
Κάρτα γρήγορης αναφοράς με οδηγίες

Απινιδωτικό Σοκ

Ενηλίκες:	Shock 1: 150J; Shock 2: 150J; Shock 3: 200J
Παιδιά:	Shock 1: 50J; Shock 2: 50J; Shock 3: 50J

Λειτουργικό Προφίλ

Γλώσσες Λειτουργίας	Ελληνικά ή Αγγλικά
Μνήμη	90 λεπτών ΗΚΓ και καταγραφή γεγονότος / συμβάντος
Μεταφορά Δεδομένων	Ειδικό καλώδιο USB για σύνδεση απευθείας στον υπολογιστή και λογισμικό επιθεώρησης δεδομένων.
Πιστοποίηση	ISO και CE

PadPak™ - Μπαταρία και Pads Ηλεκτροδίων

Διάρκεια Ζωής:	4 έτη από την ημερομηνία κατασκευής
Βάρος:	200gr
Διαστάσεις:	10 x 13.3 x 2.4cm
Τύπος Μπαταρίας:	LiMnO2
Δυνατοτητα Απινίδωσης:	> 60 shocks at 200J 18V, 1.5 Amp Hrs
Ηλεκτρόδια:	σετ ηλεκτροδίων HeartSine samaritan®
Εύρος επιφάνειας gel:	100cm ²
Μήκος Καλωδίου:	1 m

► Παραδίδεται με γραπτή Εγγύηση 10 ετών από τον κατασκευαστή

Εξουσιοδοτημένος Μεταπωλητής HeartSine Samaritan®